

Infračervená lampa Weelko Therap

Model: 1003



VÍTEJTE

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtete tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy způsobené nesprávným používáním přístroje.

VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo špatně větraném prostředí, jako jsou vlhké místnosti, koupelny atd., aby nedošlo k poškození elektrických součástí vašeho přístroje.

Nikdy nepoužívejte jednotku venku, vystavení těmto vlivům může dojít k poškození.

Napájecí kabel musí být odpojen v případě, že lampa nebude používána delší dobu.

Nikdy za žádných okolností se nepokoušejte otevřít nebo zkontrolovat vnitřní součásti nebo příslušenství z přístroje. Pokud je to nevyhnutelné, obraťte se na svého dodavatele nebo kvalifikovaného technika.

Bude-li napájecí kabel zničen, požádejte profesionální servis o výměnu, aby se zabránilo nebezpečí, nebo se obraťte na svého prodejce.

Nedotýkejte se žárovky během léčby a půl hodiny poté, aby nedošlo k popáleninám.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC

RECYKLACE





Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Montáž základny podle schématu níže:

2. Vložte lampu do základny:

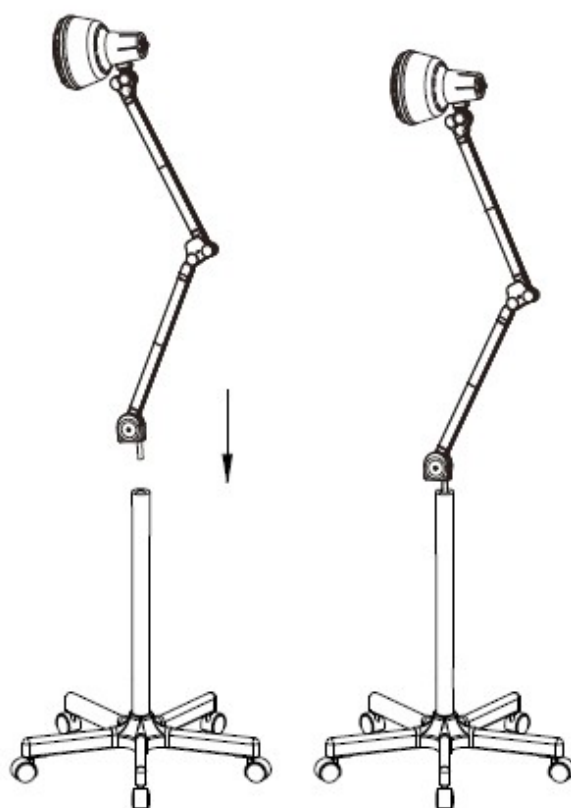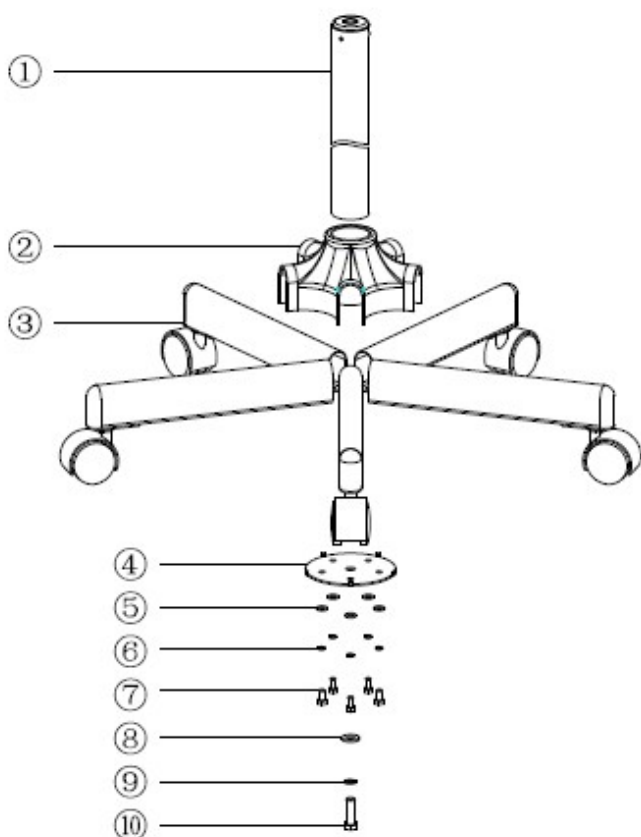

NÁVOD K POUŽITÍ

A) Příprava procedury

1. Uložte zákazníka do pohodlné polohy.
2. Zkontrolujte, zda klient nemá žádné kontraindikace zabraňující proceduře.
3. Aplikujte zákazníkovi krém či jiný produkt podporující spalování tuků na požadovanou část těla.

B) Práce s lampou

1. Umístěte lampu na rovnou stabilní plochu, aby nemohlo dojít k jejímu převrácení.
2. Nastavte pozici lampy dle polohy léčené části těla – vzdálenost lampy od kůže by měla být větší než 30 cm, aby nedošlo k poškození kůže.
3. Připojte napájení lampy do sítě a pomocí kolečka nastavte požadovanou intenzitu světla (proti směru hodinových ručiček pro nižší intenzitu, po směru hodinových ručiček pro vyšší intenzitu).
4. Doporučený čas procedury by neměl překročit maximální dobu 30 minut na každé použití!
5. Po skončení procedury nastavte intenzitu světla na nejnižší a vypínačem lampu vypněte, následně odpojte ze sítě.

ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte žárovku.

Nepoužívejte lampu pod nestabilním napětím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost produktu: 7,8 kg

Rozměry produktu: 155 x 70 x 20 cm

Rozměry balení: 77x 30 x 24 cm

Hmotnost balení: 9 kg

Výkon: 275 W

Vlnová délka: 780 nm – 860 nm

Svítivost žárovky: 5000 hodin

Délka kabelu: 150 cm

Napětí: 100 V ~ 240 V ~ 120 V / 220 V

Frekvence: 50 Hz / 60 Hz

Infračervená lampa Weelko Therap

Model: 1003



VITAJTE

Ďakujeme za nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokiaľ si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

VAROVANIE

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo zle vetranom prostredí, ako sú vlhké miestnosti, kúpeľne atď., aby nedošlo k poškodeniu elektrických súčastí vášho prístroja.

Nikdy nepoužívajte jednotku vonku, vystavenie týmto vplyvom môže dôjsť k poškodeniu.

Napájací kábel musí byť odpojený v prípade, že lampa nebude používaná dlhšiu dobu.

Nikdy za žiadnych okolností sa nepokúšajte otvoriť alebo skontrolovať vnútorné súčasti alebo príslušenstvo z prístroja.

Ak je to nevyhnutné, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo kvalifikovaného technika.

Ak bude napájací kábel zničený, požiadajte profesionálny servis o výmenu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu, alebo sa obráťte na svojho predajcu.

Nedotýkajte sa žiarovky počas liečby a pol hodiny po tom, aby nedošlo k popáleninám.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC

RECYKLÁCIA





Pokiaľ je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený týmto symbolom, nemal by byť považovaný za bežný komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Montáž základne podľa schémy nižšie:

2. Vložte lampu do základne:

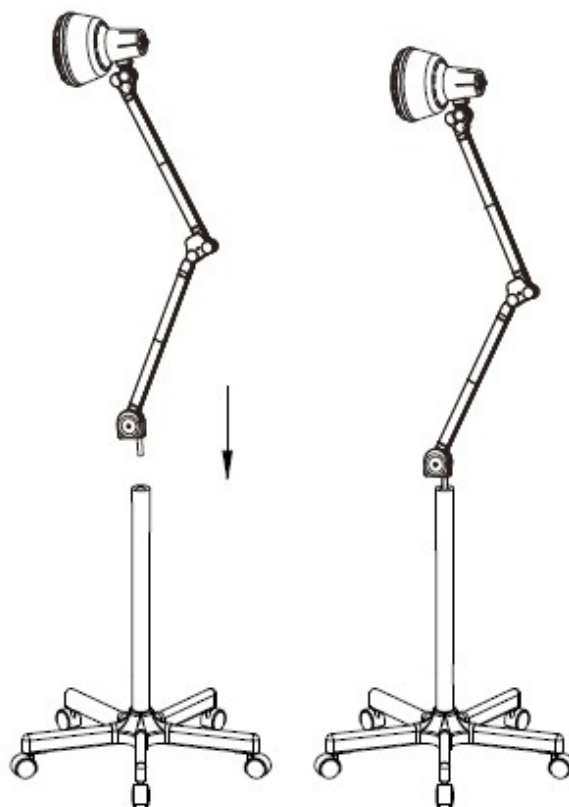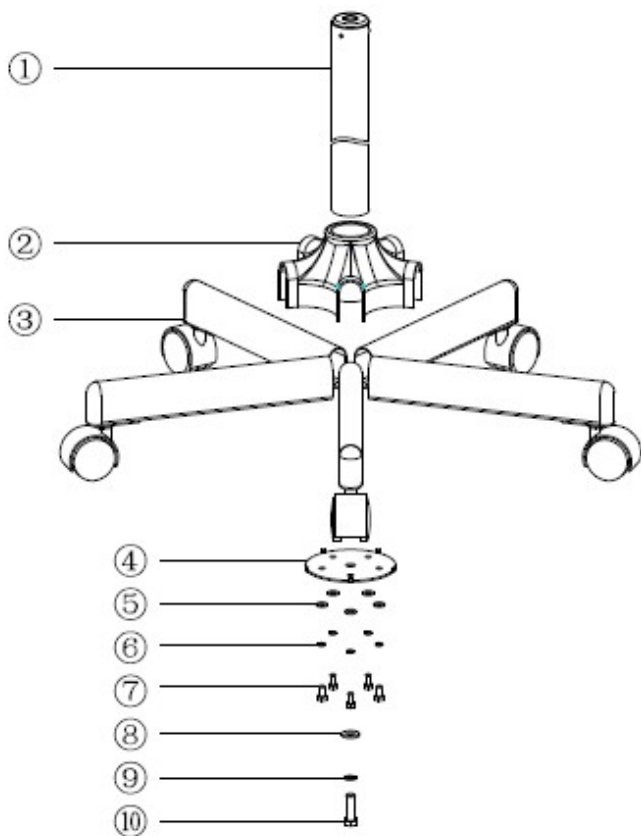

NÁVOD NA POUŽITIE

A) Príprava procedúry

- 1 Uložte zákazníka do pohodlnej polohy.
- 2 Skontrolujte, či klient nemá žiadne kontraindikácie zabraňujúce procedúre.
- 3 Aplikujte zákazníkovi krém či iný produkt podporujúci spaľovanie tukov na požadovanú časť tela.

B) Práca s lampou

1. Umiestnite lampu na rovnú stabilnú plochu, aby nemohlo dôjsť k jej prevráteniu.
2. Nastavte pozíciu lampy podľa polohy liečenej časti tela – vzdialenosť lampy od kože by mala byť väčšia ako 30 cm, aby nedošlo k poškodeniu kože.
3. Pripojte napájanie lampy do siete a pomocou kolieska nastavte požadovanú intenzitu svetla (proti smeru hodinových ručičiek pre nižšiu intenzitu, v smere hodinových ručičiek pre vyššiu intenzitu).
4. Odporúčaný čas procedúry by nemal prekročiť maximálnu dobu 30 minút na každé použitie!
5. Po skončení procedúry nastavte intenzitu svetla na najnižšiu a vypínačom lampu vypnite, následne odpojte zo siete.

ÚDRŽBA

Pravidelne čistite žiarovku.

Nepoužívajte lampu pod nestabilným napätím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť produktu: 7,8 kg

Rozmery produktu: 155 x 70 x 20 cm

Rozmery balenia: 77x 30 x 24 cm

Hmotnosť balenia: 9 kg

Výkon: 275 W

Vlnová dĺžka: 780 nm – 860 nm

Svietivosť žiarovky: 5000 hodín

Dĺžka kábla: 150 cm

Napätie: 100 V ~ 240 V ~ 120 V / 220 V

Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz