



P-01A

## Ultrazvukový přístroj Ultrasound Portable P-01 - přenosný

---

### VÍTEJTE!

Děkujeme za nákup. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před použitím přístroje. Můžete také požádat odborníka o radu, aby jste se ujistili, že používáte přístroj správně. Neneseme žádnou odpovědnost za případné úrazy, k nimž dochází při použití.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů z nástrojů bez předchozího upozornění. Pokud jsou uvedeny nějaké chyby tomto návodu, prosím neváhejte a pošlete nám informující e-mail, abychom mohli chyby opravit.

---

### VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že napětí přístroje odpovídá napětí sítě.

### UPOZORNĚNÍ:

- \* Ujistěte se, že jmenovité napětí přístroje odpovídá napětí sítě.
  - \* **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadla nebo jiné nádoby s vodou.
  - \* Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
  - \* Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda nenesete znatelné známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
  - \* Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.
  - \* Tento přístroj není určen pro použití dětí, stejně jako lidé s nějakými psychickými, sensorickými nebo mentálními postiženími.
  - \* Dětem není dovoleno hrát si s přístrojem.
  - \* Čištění a údržba nesmí být provedena dětmi.
  - \* Vždy odpojte přístroj ihned po použití.
  - \* Nepoužívejte přístroj po dobu těhotenství
  - \* Nepoužívejte přístroj v případě srdečních chorob
  - \* Nepoužívejte přístroj na suchou pokožku
- 

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené v Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
  2. Podmínky stanovené v elektromagnetické komptabilitě směrnice 2004/108/EC
- 

### RECYKLACE:

Kdykoli některý z našich elektrických výrobků nebo jejich prezentace obalů nese tento symbol, znamená to, že tyto výrobky by neměly být považovány za konvenční komunální odpad v Evropě. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem, zlikvidujte jej v souladu s místními zákony a jak je třeba pro likvidaci elektrických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**Bez předchozího navlhčení pokožky či nesprávného kontaktu s kůží, efekt přístroje může být snížen. Nikdy nepoužívejte přístroj na suchou pokožku.**

1. Důkladně umyjte partie, které chcete ošetřit.
2. Naneste zeštěhlující gel nebo krém na problematické partie. Ultrazvuk může usnadnit průchod potřebných látek hlouběji do kůže a umocnit tak efekt přípravku v podkožní vrstvě, V případě, že používaný produkt má sám o sobě zahřívací efekt, počkejte, až krém či gel úplně vychladne.
3. Připojte jednu část napájecího kabelu k masážnímu přístroji v určeném místě a druhou část zapojet do zásuvky.
4. Stiskněte tlačítko On – pro zapnutí, Off – pro vypnutí.

**Ultrazvuk je vhodný pro všechny typy pleti. Doba masáže a nastavení stroje lze nastavit pro každý jednotlivý typ pleti. Pro citlivou pleť, zkrácení doby léčby na 3-5 minuty, a ujistěte se, že nastavení výkonu je na nejnižší úrovni začít.**

---

## ČIŠTĚNÍ:

Při čištění spotřebiče se vždy ujistěte, že je úplně v pořádku a odpojen od elektrické sítě.

\* Vyčistěte spotřebič měkkým, vlhkým a čistým hadříkem.

### Technické údaje:

**Kmitočet ultrazvuku:** 1 MHz

**Výkon ultrazvuku:** 1 W/cm<sup>2</sup>

**Hmotnost produktu:** 0,2 kg

**Hmotnost balení:** 0,31 kg

**Napětí:** 100V-120V/220V-240V

**Frekvence:** 50-60Hz



**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte v blízkosti vany nebo jiné nádoby naplněné vodou.

© 2014 Weelko (CZ/SK © 2014 Detail - Hair style s.r.o.)

Importer ČR / SR: **Detail – Hair style s.r.o.** | [www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz) | [www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk)



P-01

## Ultrazvukový prístroj Ultrasound Portable P-01 - prenosný

---

### VITAJTE!

Ďakujeme za nákup. Prečítajte si prosím pozorne tieto pokyny pred použitím prístroja. Môžete tiež požiadať odborníka o radu, aby ste sa uistili, že používate prístroj správne. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ku ktorým dochádza pri použití.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu detailov z nástrojov bez predchádzajúceho upozornenia. Ak sú uvedené nejaké chyby tomto návode, prosím neváhajte a pošlite nám informujúca e-mail, aby sme mohli chyby opraviť.

---

### VAROVANIE:

Uistite sa, že napätie prístroja zodpovedá napätiu siete.

### UPOZORNENIE:

- \* Uistite sa, že menovité napätie prístroja zodpovedá napätiu siete.
  - \* UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadla alebo inej nádoby s vodou.
  - \* Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
  - \* Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nenesie znateľné známky poškodenia. Nepoužívajte, ak je poškodený.
  - \* Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.
  - \* Tento prístroj nie je určený pre použitie detí, rovnako ako ľudia s nejakými psychickými, senzorickými alebo mentálnym postihnutím.
  - \* Deťom nie je dovolené hrať sa s prístrojom.
  - \* Čistenie a údržba nesmie byť vykonaná deťmi.
  - \* Vždy odpojte prístroj ihneď po použití.
  - \* Nepoužívajte prístroj počas tehotenstva
  - \* Nepoužívajte prístroj v prípade srdcových chorôb
  - \* Nepoužívajte prístroj na suchú pokožku
- 

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené v Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
  2. Podmínky stanovené v elektromagnetické komptabilitě směrnice 2004/108/EC
- 

### RECYKLÁCIA:

Kedykoľvek niektorý z našich elektrických výrobkov alebo ich prezentácie obalov nesie tento symbol,

---

znamená to, že tieto výrobky by nemali byť považované za konvenčné komunálny odpad v Európe. Pre zabezpečenie správneho nakladania s týmto odpadom, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi zákonmi a ako je potrebné pre likvidáciu elektrických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.

## NÁVOD NA POUŽITIE:

**Bez predchádzajúceho navlhčenie pokožky či nesprávneho kontaktu s pokožkou, efekt prístroja môže byť znížený. Nikdy nepoužívajte prístroj na suchú pokožku.**

1. Dôkladne umyte partie, ktoré chcete ošetriť.
2. Naneste zehňujúci gél alebo krém na problematiku partie. Ultrazvuk môže uľahčiť prechod potrebných látok hlbšie do kože a umocniť tak efekt prípravku v podkožnej vrstve, V prípade, že použitý výrobok má sám o sebe zahrievací efekt, počkajte, až krém či gél úplne vychladne.
3. Pripojte jednu časť napájacieho kábla k masážnemu prístroju v určenom mieste a druhú časť zapojte do zásuvky.
4. Stlačte tlačidlo On - pre zapnutie, Off - pre vypnutie.

**Ultrazvuk je vhodný pre všetky typy pleti. Doba masáže a nastavenie stroja možno nastaviť pre každý jednotlivý typ pleti. Pre citlivú pleť, skrátenie doby liečby na 3-5 minúty, a uistite sa, že nastavenie výkonu je na najnižšej úrovni začať.**

---

## ČISTENIE:

Pri čistení spotrebiča sa vždy uistite, že je úplne v poriadku a odpojený od elektrickej siete.

\* Spotrebič vyčistite mäkkou

**Kmitočet ultrazvuku:** 1 MHz


**Výkon ultrazvuku:** 1 W / cm<sup>2</sup>

**Hmotnosť produktu:** 0,2 kg

**Hmotnosť balenia:** 0,31 kg

**Napätie:** 100V-120V / 220V-240V

**Frekvencia:** 50-60Hz

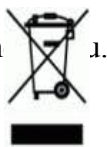

**UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti vane alebo inej nádoby naplnenej vodou.**

© 2014 Weelko (CZ/SK © 2014 Detail - Hair style s.r.o.)

Importer ČR / SR: **Detail – Hair style s.r.o.** | [www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz) | [www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk)